

Car Massager SL-D24-1

۱ ماساژ مالشی و لرزشی

۲ حالت ماساژ مالشی که از بالا به پایین کمر حرکت می کند

۳ حرکت به بالا به وسیله نورآبی حرکت به پایین به وسیله نور قرمز

۴ ماساژ تخصصی لرزشی بر روی نقاط مهم ران

۵ کنترل دستی تنظیم را راحت می کند

۶ بسیار راحت برای نصب روی انواع صندلی ها

۷ برای استفاده درون منزل و ماشین



کلیدهای لرزشی

۱ حالت لرزشی: ۳ انتخاب برای حالت لرزش وجود دارد. هر دفعه که شما دکمه vibration mode را فشار دهید به حالت

بعدی ماساژ لرزشی خواهید رفت

۲ قدرت: این حالت فقط در حالت لرزشی فعال است ۳ انتخاب وجود دارد: قوی، متوسط، ضعیف

کلیدهای مالشی

۱ Full body تمام کمر (کامل): زمانی که کلید ماساژ کامل را فشار دهید چراغ قرمز که بالای دکمه است روشن می شود.

۲ ماساژ مالشی به صورت کامل در قسمت کمر شروع می شود

۳ Upper یا کمر: زمانی که کلید ماساژ بالا تنه را فشار دهید چراغ قرمز که بالای دکمه است روشن می شود. ماساژ مالشی

با تمرکز بر روی میان و بالای کمر شروع به کار می کند

۴ Lower پایین کمر: زمانی که کلید ماساژ پایین کمر را فشار دهید چراغ قرمز که بالای دکمه است روشن


می شود. ماساژ مالشی با تمرکز بر روی میان کمر و پایین کمر شروع به کار می کند

کلید Demo

برای مشاهده خلاصه ای از کارآیی دستگاه، این دکمه را فشار دهید. این دکمه که ترکیبی از ۳ حالت

لرزشی و ۳ حالت قدرت است نمایش می دهد. در پایان نمایش دستگاه به صورت خودکار خاموش

می شود

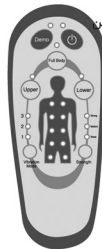

72F0206 - D241-A



ماساژ مالشی برای ازبین بردن گرفتگی عضلات

دارای سه حالت: قوی، ضعیف و متوسط قابل تنظیم که احساس ماساژ گرفتن توسط یک

ماساژور حرفه ای را به شما القا می کند این پشتی ماساژور می تواند در منزل یا ماشین

استفاده شود

با تشکر از حسن انتخاب شما در انتخاب این محصول

خواهشمندیم این دفترچه راهنما را پیش از استفاده از این دستگاه به دقت مطالعه نمایید تا با نحوه کار آن آشنا شوید. همچنین توصیه می‌کنیم به نکات ایمنی ذکر شده در این دفترچه توجه کافی را مبذول نمایید و نیز دفترچه راهنما را برای استفاده‌های بعدی در دسترس خود قرار دهید.



تذکرات مهم ایمنی :

۱. لطفاً از قرار دادن انگشت در فضای بین ماساژور و کلاهک ماساژور خودداری کنید

۲. لطفاً از ورود اشیاء خارجی به درون دستگاه جلوگیری کنید.

۳. از ورود آب به درون دستگاه برای جلوگیری از برق‌گرفتگی و رسیدن آسیب به دستگاه خودداری کنید

۴. اگر سیم یا دوشاخه خراب شد لطفاً سعی به تعمیر آن نکنید و به نمایندگی مجاز مراجعه کنید

۵. لطفاً از منبع برق قابل اطمینان و مناسب با دستگاه استفاده کنید

۶. لطفاً برق دستگاه را بعد از استفاده و قبل از تمیز کردن دستگاه قطع کنید

۷. قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید

۸. از قطعات اضافی که توصیه نشده استفاده نکنید

۹. از این دستگاه در محیط باز استفاده نکنید

۱۰. اگر روکش دستگاه آسیب دید از آن استفاده نکنید

۱۱. اگر احساس ناخوشی می‌کنید از دستگاه استفاده نکنید

شرایط محیط

لطفاً در حرارت بالا و در محیط‌هایی با رطوبت بالا مانند حمام استفاده نشود

لطفاً پس از تغییر شدید آب و هوا از دستگاه استفاده نکنید

لطفاً از دستگاه در هوای آلوده و پر گرد و خاک استفاده نکنید

افراد که مجاز به استفاده از این دستگاه نیستند

۱. افرادی که بیماری‌های واگیر دار پوستی دارند

۲. افرادی که از پوکی استخوان رنج می‌برند .

۳. افرادی که بیماری قلبی دارند و یا افرادی که قطعه الکتریکی پزشکی مانند تنظیم‌کننده ضربان قلب حمل می‌کنند .

۴. افرادی که از دمای بالای بدن (تب) رنج می‌برند .

۵. خانمها در دوران بارداری و قاعدگی

۶. افرادی که دچار بیماری پوستی هستند و یا قسمتی از بدنشان زخم می‌باشد .

۷. کودکان زیر ۱۴ سال و یا افرادی که قادر به کنترل دستگاه نمی‌باشند .

۸. افرادی که به گفته پزشک تحت استراحت مطلق می‌باشند .

۹. افرادی که پوست بدنشان مرطوب می‌باشد .

۱۰. دستگاه هنگام کار کردن گرم می‌شود افرادی که به گرما حساسیت دارند

تذکرات امنیتی

۱. از دست خیس برای بیرون کشیدن دوشاخه استفاده نکنید

۲. برای بیرون کشیدن دوشاخه برق از کشیدن سیم خودداری کنید

۳. لطفاً به سیم‌ها آسیب نرسانید

۴. در هنگام قطع برق از دستگاه دوری کنید تا در هنگام وصل ناگهانی برق از آسیب دیدن خودداری کنید

۵. در زمانی که دستگاه به صورت غیر طبیعی کار می‌کند از آن استفاده نکنید و با نمایندگی تماس بگیرید

۶. در زمانی که احساس ناخوشی می‌کنید از دستگاه استفاده نکنید و مراتب را با پزشک خود در میان بگذارید

۷. اگر آداپتور دستگاه آسیب دید باید توسط نمایندگی مجاز تعمیر یا جایگزین شود تا خطری شما را تهدید نکند

۸. کودکان باید تحت نظارت از این دستگاه استفاده کنند.

این دستگاه یک نسل جدید از دستگاه‌های ماساژور است که بسیار موش در تنظیم گردش خون و سوخت و ساز بدن می‌باشد و همچنین از بین برنده گرفتگی عضلات و کاهش درد، آرامش بخشیدن به ماهیچه‌های شکم و پهلوها به وسیله توانایی ماساژ می‌باشد

قسمت‌های دستگاه

قسمت متحرک ماشینی ، موتور لرزشی ، کنترل دستی ، آداپتور برق ، شارژر فندکی ماشین

راهنما

۱. زمانی که برق وصل شد ، چراغ نشان دهنده روشن می‌شود

(اگر چراغ قرمز روشن و خاموش شد) نشان دهنده این است که فیض برق ماساژور درست نصب شده و دستگاه به حالت آماده باش درمی‌آید اگر دکمه روشن/خاموش را فشار دهید دستگاه شروع به کار می‌کند

۲. زمانی که دستگاه روشن است شما می‌توانید هر کدام از مدل‌های ماساژ را انتخاب کنید

۳. جهت خاموش کردن دستگاه ، دکمه روشن / خاموش را فشار دهید . چراغ نشان دهنده شروع به روشن و خاموش شدن می‌کند ، موتور لرزاننده خاموش می‌شود، دسته متحرک ماساژ ماشینی به پایین می‌رود و می‌ایستد،

اگر چراغ نشان دهنده خاموش شد دستگاه خاموش است

۴. زمانی که دستگاه روشن است اگر بیش از ۱۵ دقیقه استفاده شود به صورت خودکار خاموش می‌شود

۵. دکمه‌های دستگاه فقط در شرایط کارکردن فعال است و در حالت آماده به کار فعال نیست